

Chaises de douche

CARENDO



Le *Carendo* est un fauteuil d'hygiène électrique doté de fonctionnalités uniques qui offrent des solutions optimales à chaque stade du soin d'hygiène aidé. Cela signifie moins d'effort physique pour les soignants lors des tâches traditionnellement réalisées sur un lit comme le déshabillage/rhabillage du résident ou le changement des changes pour incontinents.

Les Plus de la chaise de couche CARENDO

Hauteur variable et inclinaison simultanées - Capacité 136 Kg

- Adapté aux services les plus lourds
- Ergonomie de travail pour le personnel soignant
- Très grande fiabilité prouvée par des tests de résistance en laboratoires

Fauteuil multifonctions

- Déshabillage complet
- Douche du résident
- Accès total au siège
- Position de confort
- Mise aux toilettes
- Pédicure
- Shampoing
- Soins des plaies
- Soins corporels

Jeu de 2 batteries étanches interchangeables

- Indépendant de la prise d'alimentation
- Couvre largement les besoins d'une journée de douche

« Position soins » permettant de soulever la partie inférieure du corps

- Facilite le change des couches d'incontinence
- Permet l'habillage et le déshabillage du siège

« Position confort »

- Permet de doucher les résidents en position confortable
- Position plus ergonomique pour le soignant

Châssis court de 640 mm x 925 mm

- Passe là où le fauteuil-roulant passe
- Se faufile partout, même dans les espaces les plus restreints

Assise adaptée pour les soins corporels et support bassin

- Meilleur accès pour toilettes du siège
- Bassin adapté pour les transferts

Autres caractéristiques

- Oreiller
- Coupe-Circuit
- Roues ultra maniables et résistantes à la corrosion



Convient à :

- **Barbara** : dans une certaine mesure, peut se tenir debout seule
- **Carl** : assis dans un fauteuil roulant, est à peine capable de se soutenir.
- **Doris** : n'a plus aucun appui



En option :

- Bassin avec couvercle
- Support bassin
- Coussin dos



Fonction soins



Confort et soutien



Poignées directionnelles ergonomiques



Accès aisé



Désinfection facile



Intégration aux toilettes




2 batteries pour 100% de disponibilité


Caractéristiques techniques

Caractéristiques du produit

Capacité de levage	136 kg
Poids	64 kg
Cadre, largeur maximale	810 mm
Châssis, entre les pieds	500 mm
Châssis, longueur maximale (freins compris)	925 mm
Amplitude de levage (siège)	550 mm
Hauteur du siège, position la plus basse/haute	470/950 mm
Hauteur/longueur min. en position redressée	1230/890 mm
Longueur max. en position allongée	1520 mm
Homologations	TüV
Largeur entre les jambes	520 mm
Espace sous le châssis	42 mm
Tension d'alimentation électrique	24 V CC
Degré de protection	IPX4
Batterie	
Type	NiMH
Puissance max	150 VA
Niveau sonore	< 58 dB
Mode de fonctionnement	ED max 10 % ; max. 2 min MARCHE, min. 18 min ARRÊT

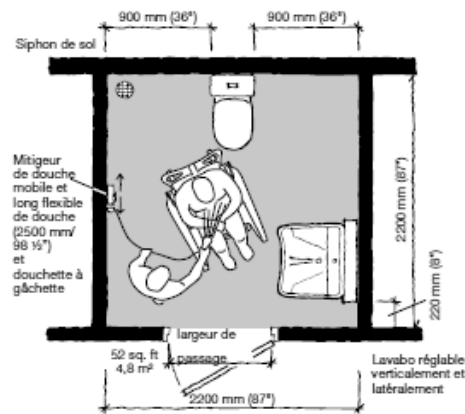

Espace de travail requis pour la douche d'un résident en position assise relevée.

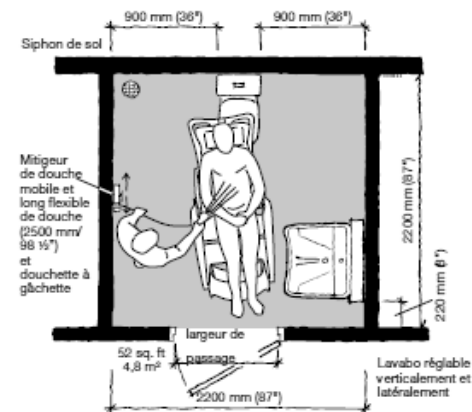

Espace de travail requis pour la douche d'un résident en position totalement inclinée

Carendo, position	Longueur max. mm (pouces)	Largeur, mm (pouces)	Hauteur max. mm (pouces)	Hauteur du siège, mm (pouces)
Position assise la plus basse	890 (35")	650 (25 5/8")	1230 (48 3/8")	510 (20 1/8")
Position assise la plus haute	940 (37")	650 (25 5/8")	1560 (61 3/8")	950 (37 3/8")
Position allongée la plus basse	1390 (54 3/4")	650 (25 5/8")	1050 (41 3/8")	470 (18 1/2")
Position allongée la plus haute	1520 (59 7/8")	650 (25 5/8")	1290 (50 3/4")	950 (37 3/8")
Élévation de soins, position la plus basse	1390 (54 3/4")	650 (25 5/8")	1050 (41 3/8")	780 (30 3/4")
Élévation de soins, position la plus haute	1520 (59 7/8")	650 (25 5/8")	1490 (58 5/8")	1270 (50")

* Se référer au manuel d'utilisations

Chez Arjo, nous avons pour mission d'améliorer la vie quotidienne des personnes en situation de mobilité réduite et de relever les défis liés au bien-être. Avec des produits et des solutions qui garantissent un transfert ergonomique des patients, l'hygiène personnelle, la désinfection, la prévention et le traitement efficaces des escarres et de la thrombose veineuse, nous aidons les professionnels de santé à améliorer continuellement la sécurité et la dignité des soins. Tout ce que nous faisons, nous le faisons en pensant à l'humain avant tout. www.arjo.com


Arjo France SAS
2, Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
59436 Roncq Cedex
France
Tel : 03 20 28 13 13
info.france@arjo.com
www.arjo.com

* L'humain avant tout

01.BO.01.4.FR.1.AHG - Février 2016 Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Parker est un dispositif médical de classe I, fabriqué par Arjo. Il est destiné aux soins d'hygiène assistés dans des environnements de soins. Lisez attentivement la notice d'utilisation. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo. © Arjo, 2016.




CAREDO

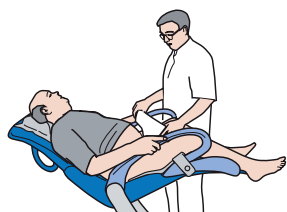


ARJOHUNTLEIGH

GETINGE GROUP

1

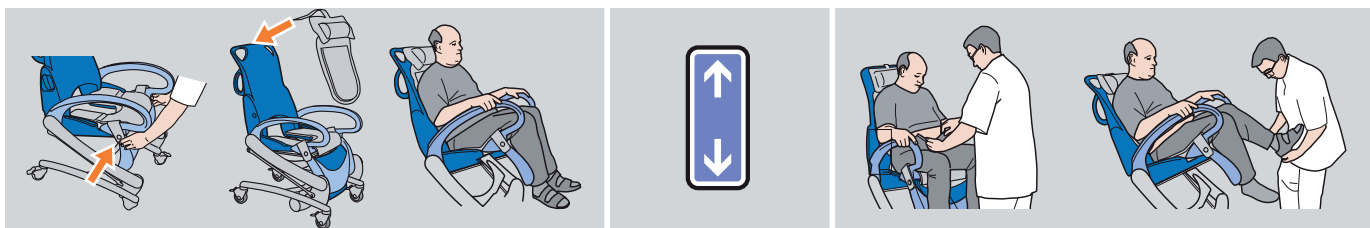


2

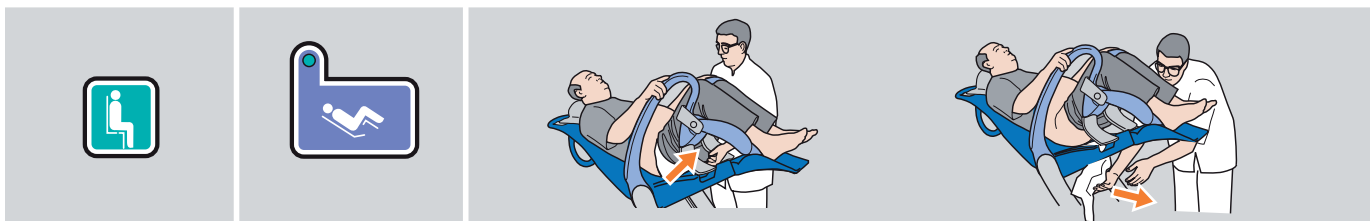


3



4

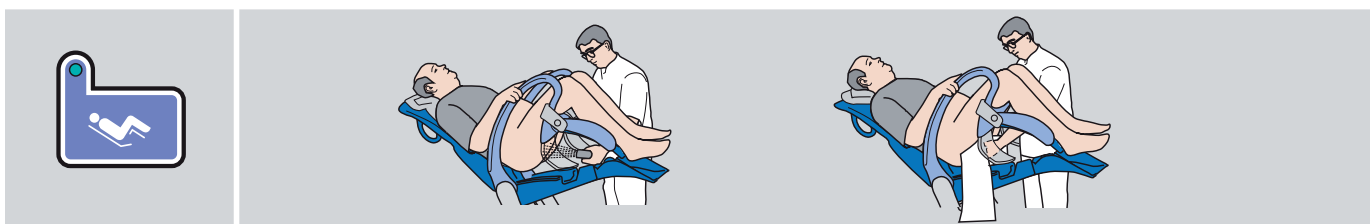


5

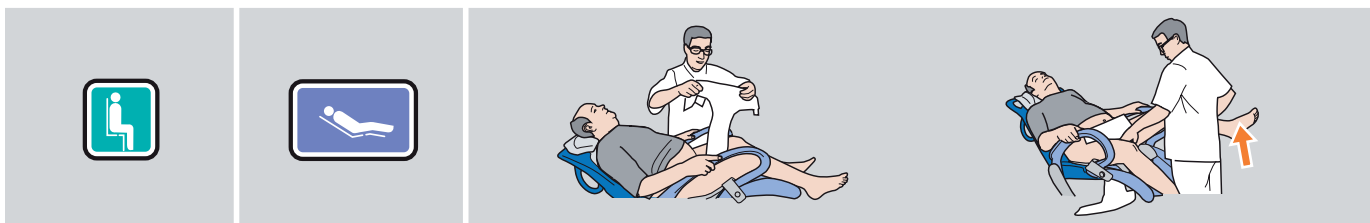

6



7

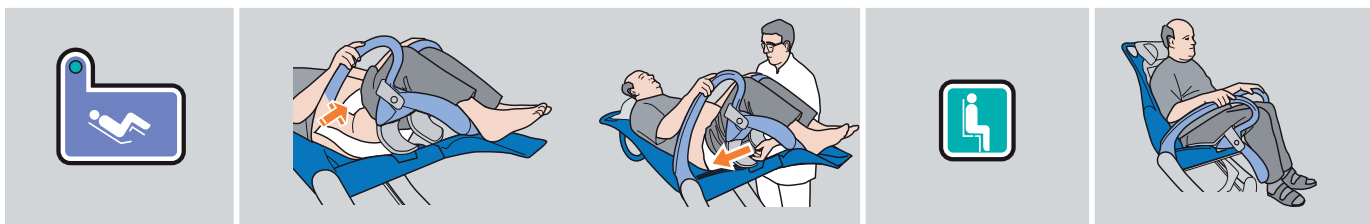

08.CC.01_5





Utilisation du fauteuil à usage multiple CARENDO

Sur une petite desserte : 2 gants identifiables, 2 serviettes éponges, change propre, sac à linge sale et poubelle.

Utiliser un verticalisateur pour déshabiller et asseoir le résident sur le Carendo.

La prise en charge diffère suivant que le résident porte un pantalon ou une robe :

- ☞ Pantalon : une fois verticalisé, abaisser le pantalon, ôter le slip et/ou le change. Essuyer le plus gros.
- ☞ Robe : relever celle-ci et la rabattre par dessus la sangle du verticalisateur. Oter slip et/ou change. Essuyer le plus gros.



Etape	Action	
1	Mettre 2 freins. Installer le résident et retirer la sangle. Verrouiller le coussin de dos. Ajuster la hauteur du fauteuil si nécessaire. Déshabiller le haut du corps. Laver le dos.	
2	Passer en position de confort. Finir le déshabillage du bas du corps. Adapter la hauteur pour laver les cheveux, la tête, les bras, le torse, le bas-ventre, les jambes, les pieds. Rincer puis sécher les parties accessibles du résident et du fauteuil. Couvrir le torse.	
3	Déverrouiller le coussin de dos puis revenir à la position assise, (décoller une épaule et maintenir la pression sur la télécommande jusqu'au CLAC!).	
4	Remonter et verrouiller le coussin de dos. Passer en position de soin. Rabattre les parties arrières du coussin. Faire la toilette du siège et sécher. Remettre les rabats du coussin d'assise en place et les sécher.	
5	Retour en position assise, décoller une épaule (maintenir la pression sur la télécommande jusqu'au CLAC!). Sécher le dossier, le dos et rhabiller le haut du corps. Rhabillage du bas du corps jusqu'au dessus des genoux.	
6	Avec le verticalisateur, mettre le résident debout. Lui remettre son change et/ou son slip ainsi que son pantalon.	

Le **CLAC!** Signale le bon verrouillage du mécanisme en fin de remise en position assise du fauteuil

Laver et désinfecter le fauteuil et ses accessoires puis changer la batterie.



Utilisation du fauteuil à usage multiple CARENDO

Sur une petite desserte : 2 gants identifiables, 2 serviettes éponges, change propre, sac à linge sale et poubelle.

Utiliser un lève-malade passif pour asseoir le résident sur Carendo.

La prise en charge diffère suivant que le résident porte un pantalon ou une robe :

- ☞ Pantalon, avant de positionner le harnais, il est souhaitable d'abaisser le pantalon pour découvrir le sacrum.
- ☞ Robe, il est nécessaire de remonter celle-ci jusqu'à la taille avant de positionner le harnais.

Etape	Action	
1	Mettre 2 freins. Installer le résident et retrait du harnais. Verrouiller le coussin de dos. Ajuster la hauteur du fauteuil si nécessaire. Ouvrir et abaisser le pantalon pour découvrir les hanches (si non préalablement fait). Déshabiller le haut du corps.	
2	Monter totalement le fauteuil puis mettre en position de soin (appliquer une légère pression de la main sur un genou). Rabattre les parties arrières du coussin d'assise. Abaisser le pantalon, le slip, ôter le change, chaussures et chaussettes. On doit pouvoir voir entre les cuisses. Remettre les rabats du coussin en place.	
3	Déverrouiller le coussin de dos puis revenir à la position assise, (décoller une épaule et maintenir la pression sur la télécommande jusqu'au CLAC I). Ajuster la hauteur du fauteuil si nécessaire puis laver le dos.	
4	Passer en position de confort. Finir le déshabillage du bas du corps. Adapter la hauteur pour laver les cheveux, la tête, les bras, le torse, le bas-ventre, les jambes, les pieds. Rincer puis sécher les parties accessibles du résident et du fauteuil. Couvrir le torse. Remettre le slip, les bas, les chaussettes, le pantalon jusqu'aux genoux...	
5	Revenir à la position assise, décoller une épaule (maintenir la pression sur la télécommande jusqu'au CLAC I)	
6	Remonter et verrouiller le coussin de dos. Passer en position de soin. Rabattre les parties arrières du coussin. Faire la toilette du siège, sécher (résident et fauteuil), mettre en place le change, le slip (ou autre), le pantalon. Sécher et remettre les rabats du coussin d'assise en place.	
7	Déverrouiller le coussin de dos puis revenir à la position assise (décoller une épaule et maintenir la pression sur la télécommande jusqu'au CLAC I). Abaisser le fauteuil. Sécher(résident et fauteuil) le dos et rhabiller le haut du corps.	

Le **Clac !** Signale le bon verrouillage du mécanisme en fin de remise en position assise du fauteuil

Laver et désinfecter le fauteuil et ses accessoires puis changer la batterie.